



Keep[®]
young



LINEA APPARECCHI



Keep[®]
young

Siamo un'azienda Italiana leader nel settore dell'estetica professionale, impegnata da anni in campo cosmetico, diventata oggi una consolidata realtà nel mondo della bellezza.

KeeP young è un marchio nato grazie all'intenso lavoro di un affiatato team di produttori e specialisti di laboratorio, un gruppo di esperti di marketing, formulatori e tecnici, in grado di offrire prodotti innovativi ed orientati al futuro.

Queste diverse esperienze, in sinergia fra loro, garantiscono ai professionisti dell'estetica prodotti all'avanguardia in grado di soddisfare la richiesta sempre crescente del mercato della bellezza.

KeeP young sottopone ogni prodotto a rigorosi controlli dermatologici per garantire la massima tollerabilità ed efficacia delle formulazioni, permettendo la nostra presenza anche sui mercati internazionali.

KeeP young è rivolta esclusivamente ai professionisti dell'estetica, per offrire prodotti cosmetici, apparecchi e servizi altamente innovativi.

I NOSTRI APPARECCHI

La linea si compone di una serie di apparecchi destinati al trattamento del viso e della pelle, al massaggio del corpo e all'epilazione.

Keep young ha studiato metodologie che interagiscono per snellire, drenare, tonificare, modellare il corpo conciliando comfort e benessere.

Gli apparecchi della linea Keep young permettono il raggiungimento di risultati visibili attraverso la personalizzazione dei trattamenti sia corpo che viso e sono destinate a soddisfare tutte le esigenze dei più attrezzati Centri Estetici e Beauty Farms. Apparecchi 100% prodotti in Italia con Garanzia di 10 anni*.



* Escluso accessori.

KeepPICE^{body}

L'ULTRASUONO FREDDO




*escluso accessori

MANIPOLO KeepP Body ICE

ULTRASUONO
CONTINUO / MODULATO

CRIO
sino -5 C°

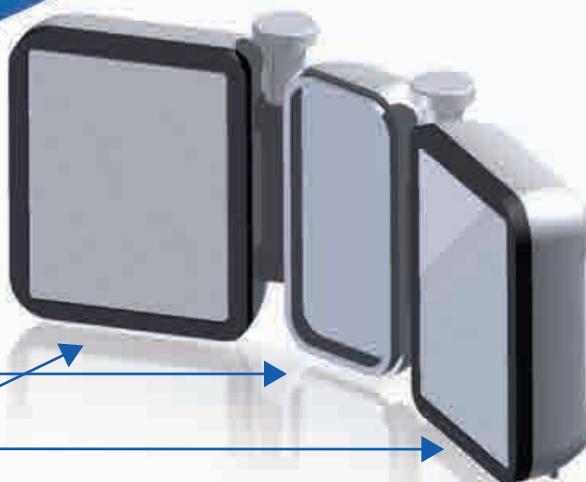

L'Ultrasuono freddo è un innovativo dispositivo per il dimagrimento rapido ed indolore, esso agisce sfruttando la sinergia di efficaci tecnologie combinate tra loro: **Crioterapia e Ultrasuono continuo e modulato.**

Questo trattamento viene effettuato con un manipolo raffreddato, e con uno ad ultrasuono, si possono effettuare trattamenti sulla cellulite in tutte le sue forme, e su adipe localizzato che si concentrano in specifiche regioni del corpo.

Il trattamento con il freddo serve a risvegliare l'attività del tessuto adiposo, consentendo una significativa riduzione di quest'ultimo, e grazie a questa combinazione sin dalla prima seduta è possibile vedere ottimi risultati.

Il lavoro dell'ultrasuono, inoltre, velocizza il processo di smaltimento tossine, riducendo l'effetto "buccia d'arancia" dell'odiata cellulite, rendendo immediatamente più liscia e tonica la pelle.

I trigliceridi, grasso imprigionato nelle cellule adipose, vengono liberati ed eliminati dall'organismo, in maniera fisiologica.

I TIPI DI INESTETISMI POSSONO ESSERE TRE



ADIPE

(solitamente addome e fianchi)



CELLULITE

(solitamente glutei e interno cosce – femminile)



MISTA

I tre inestetismi vanno trattati nel seguente modo:


1. Il freddo costante fino a -5°C ;
2. il manipolo va cambiato di zona ogni dieci min (per zona si intende ad esempio un fianco o un gluteo);
3. l'ultrasuono varia da continuo a modulato nei seguenti modi a seconda del programma scelto.
4. Trattamento consigliato 10 sedute in 30 giorni.

Il freddo risveglia l'attività della parte del tessuto adiposo addetta a bruciare i grassi e, di conseguenza, riduce l'entità dell'altra metà del tessuto adiposo, quella bianca, specializzata in accumulare calorie.


RISULTATI

- **Permettere una notevole riduzione di tessuto adiposo in breve tempo;**
- **Riduzione in cm delle aree trattate;**
- **Miglioramento dell'aspetto della cute delle aree trattate;**
- **Riduzione in peso.**


GLI EFFETTI DELL'ULTRASUONO CONTINUO

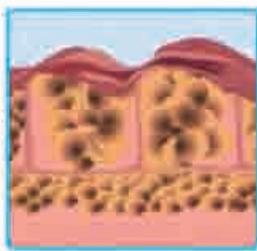

Adipe localizzato e degenerato (Tessuto adiposo Sclerotizzato)

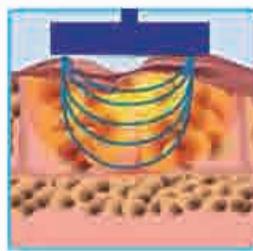

-effetto termico dell'us
-effetto di cavitazione

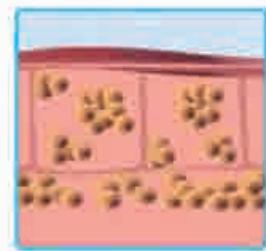

I trigliceridi, grasso imprigionato nelle cellule adipose vengono liberati ed eliminati dall'organismo in maniera fisiologica





NON PRENDERE STRANE ABITUDINI

È tempo di scoprire!

Light Jewel




LUCE PULSATA CHE RIGENERA LA TUA PELLE

Keep young, dopo anni di studi e ricerche, ha progettato il proprio apparecchio di LUCE PULSATA per trattamenti di foto-ringiovanimento*, acne*,epilazione per tutti i fototipi di pelle anche quelle abbronzate, nel rispetto delle normative vigenti.

Permette all'estetista di effettuare trattamenti continui senza surriscaldare eccessivamente la zona trattata donando sollievo e benessere al cliente.

Il principio su cui si basa è chiamato fototermolisi selettiva, che è la capacità di colpire e distruggere solo il pelo senza danneggiare il tessuto circostante, in quanto il suo bersaglio è il bulbo pilifero. Risultati visibili già dal primo trattamento, senza effetti collaterali e indolore.

LIGHT JEWEL agisce sui peli riconoscendo il pigmento melaninico come bersaglio, portando ad una mancata ricrescita che, in maniera progressiva, diventa PERMANENTE solo dopo un ciclo di sedute parallele alla fase naturale della vita del pelo (anagen, catagen, telogen).

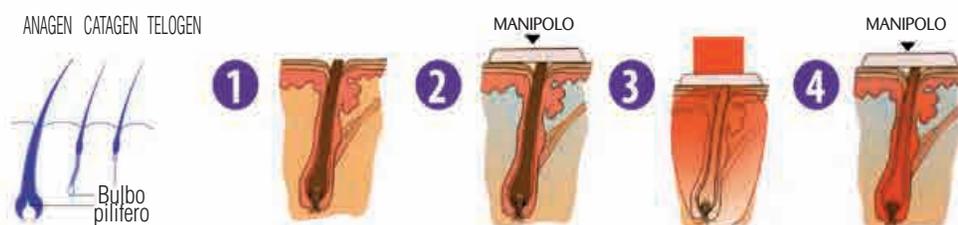

- 1 - Il pelo deve essere corto.
- 2 - il manipolo viene appoggiato sulla zona da trattare.
- 3 - Il flash di luce viene emesso distribuendosi nel tessuto.
- 4 - L'energia è assorbita dalla melanina del pelo ed è sufficiente per rallentare fino a bloccare la ricrescita dello stesso.

* Il trattamento in Italia lo può effettuare solo personale Medico.

EPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE PERMANENTE

L'epilazione mediante luce pulsata è una tecnica che ha rivoluzionato le classiche metodiche di depilazione. E' una tecnica non invasiva che dà risultati concreti e immediati al problema estetico dei peli indesiderati che accomuna uomini e donne. La luce pulsata agisce sui peli riconoscendo il pigmento melaninico come bersaglio.

- La luce viene fortemente assorbita dalla melanina del pelo;
- Il fusto si riscalda;
- Per trasmissione termica si ha coagulazione delle strutture riproduttive del follicolo;
- Pelo e follicolo sono danneggiati e il ciclo di ricrescita si interrompe.

FOTORINGIOVANIMENTO*

La tecnologia IPL (luce pulsata ad alta intensità) utilizza l'energia luminosa ad alta intensità per eliminare da viso, collo, mani e décolleté i segni evidenti di invecchiamento, dalle pigmentazioni benigne di ogni tipo fino alle piccole rughe. Il fotoringiovanimento con luce pulsata ad alta intensità è particolarmente efficace per contrastare:

- Macchie senili
- Lentigo solari
- Chiazze rosse sul décolleté
- Pori dilatati
- Couperose
- Acne e segni causati da acne

Il fotoringiovanimento è un trattamento non invasivo, non traumatico e innovativo.

Grazie a particolari filtri l'energia termica penetra negli strati della pelle stimolando la produzione di fibre elastiche, la formazione di collagene ed elastina da parte dei fibroblasti. La pelle risulterà più chiara, più liscia ed elastica, con rughe meno evidenti, donando un immediato effetto lifting. I primi risultati sono visibili già dopo 4 o 5 trattamenti e continuano a migliorare nei mesi successivi.

TRATTAMENTO ACNE CON LUCE PULSATA*

La luce pulsata trova applicazione anche per affrontare il problema estetico dell'acne attiva, non cistica (questa è demandata ai dermatologi perché di solito viene associata una cura antibiotica), con ottimi risultati.

Creando un'iperemia alla profondità desiderata si accelera il metabolismo acneico in atto, si ha pertanto una rigenerazione del sebo molto rapida dove la pelle espelle tutto ciò che deve espellere, nelle prime sedute si avrà pertanto una forte irritazione però il forte calore superficiale farà sì che si cicatrizzino i pori e si levighi la pelle.





Apparecchiatura

2in1

Keep[®]
shape

+

SONI[®]
STIMOLATORE ULTRASONICO

SKS

STIMOLATORE ULTRASONICO E VACUUM SYSTEM

STIMOLATORE ULTRASONICO E VACUUM SYSTEM

Per cavitazione si intende un effetto prodotto da un'apparecchiatura che si avvale di ultrasuoni a bassa frequenza; tale effetto non va confuso con i vecchi ultrasuoni da 1Mhz (medicali) o da 3Mhz (estetici) ancora oggi in commercio.

La cavitazione è un flusso di microbolle a forma di "cono rovesciato", causato da un'emissione ultrasonora che scaturisce attraverso la membrana vibrante di un manipolo d'acciaio; il manipolo, orientato in corrispondenza dei pannicoli adiposi ed appoggiato sulla pelle, la attraversa e va a lavorare in corrispondenza delle cellule e, "lavorandole ai fianchi", in pochi minuti le emulsiona, con una metodica rapida, indolore, molto efficace e senza nessun effetto collaterale.

Si possono ottenere delle riduzioni notevoli in poche sedute. Questa metodica è ad oggi l'unico sistema esistente, per questo genere di trattamenti, che si avvicina al livello di risultati di una liposuzione chirurgica.



*escluso accessori

In forma...a 360° TRATTAMENTO VISO/CORPO



*escluso accessori

Keep[®] shape VACUUM TERAPIA E MASSAGGIO ENDODERMICO

SEMPLICE, SICURO E PRIVO DI CONTROINDICAZIONI

La vacuum terapia o massaggio endodermico si tratta di una tecnica molto efficace per il linfodrenaggio dei tessuti, basato sull'uso del vuoto applicato sul corpo con livelli di depressione graduati e controllati ottenendo un effetto ventosa che genera un maggior afflusso di sangue nella zona, stimolando la circolazione e l'ossigenazione e velocizzando il ricambio di sostanze e l'eliminazione delle tossine che garantiscono:

- Un'azione mirata esclusivamente al tessuto cutaneo e connettivo; infatti, grazie alla corretta valutazione del livello di vuoto adottato si è in grado di determinare l'esatta azione dell'apparecchio;
- il massimo risultato estetico possibile;
- l'eliminazione di rischi di sovradosaggi di vuoto, attenendosi a parametri ormai ampiamente dimostrati e certi;
- l'assoluta assenza di effetti collaterali e di controindicazioni qualora si rispetti la Metodica di lavoro messa a punto.

BENEFICI

- Ridurre le adiposità localizzate e liberarvi dalla cellulite
- appianare la pelle a buccia d'arancia e le smagliature
- stimolare la circolazione venosa e il linfodrenaggio
- ridurre la circonferenza delle cosce, rassodare i glutei e restituire tonicità ai tessuti



SONIK

STIMOLATORE ULTRASONICO

i numeri che ti cambiano la vita... e non solo.

90

60

90



STIMOLATORE ULTRASONICO

PER DIMA GRIMENTO LOCALIZZATO E PER USO ESTETICO

La STIMOLAZIONE AD ULTRASUONI A BASSA FREQUENZA rappresenta oggi l'ultima frontiera nel campo della medicina estetica, una soluzione innovativa per dimagrire senza nessun fastidio, diminuire l'adipe e centimetri in eccesso da braccia, vita, ventre, culotte, cosce, interno ginocchio, polpaccio e combattendo così molti inestetismi, che ci condizionano psicologicamente davanti allo specchio.

Un Trattamento estetico, SENZA INTERVENTO CHIRURGICO, che grazie alla sollecitazione meccanica generata dalle vibrazioni ultrasoniche favorisce lo SCIOGLIMENTO delle cellule adipose, tale trattamento riattiva la microcircolazione che nelle ore successive favorisce l'eliminazione attraverso le vie naturali dell'organismo delle tossine.

SONIK prevede, con la sola applicazione di trasduttori di ultrasuoni esterni alla pelle, di rendere più fluido o lisare del tutto il tessuto adiposo, permettendo quindi una più facile e rapida eliminazione del pannicolo grazie ad un semplice aspiratore.

L'ultrasuono vanta una azione di disgregamento e nebulizzazione dei liquidi in minutissime goccioline e comunque crea un'azione disgregante del prodotto fluido posto a contatto con la fonte di ultrasuoni stessi, permettendo un frazionamento in strutture a peso molecolare basso, tali da poter sfruttare al massimo le alterazioni temporanee della superficie cutanea.

RISULTATI

- riduzione interno cosce
- aumento della produzione di fibroblasti, elastina e collagene
- rimodellamento del girovita
- trattamento localizzato delle adiposità
- armonizzazione glutei
- inestetismi della cellulite





*escluso accessori

OXIGEN²

OSSIGENOTERAPIA *EROGAZIONE DI OSSIGENO*

Keep OXIGEN rappresenta l'evoluzione dei trattamenti estetici supportati dalla tecnologia più avanzata che agisce, attraverso l'erogazione di ossigeno, per migliorare diversi inestetismi presenti sul viso e sul corpo di uomini e donne.

Le potenzialità dell'ossigeno ad elevato grado di purezza aumenta la circolazione sanguigna, migliorando il metabolismo cellulare e accelerando i processi di rigenerazione. L'ossigeno viene perfuso attraverso un aerografo e con l'ausilio dei principi attivi più adatti al tipo di pelle. Già dalla prima seduta le rughe risultano più distese la pelle appare più luminosa, tonica e levigata.

E indicata per:

- **Rughe d'espressione**
- **Tonificazione e ridensificazione**
- **Idratazione**

Ogni cellula del nostro corpo ha bisogno di ossigeno.

Il processo di invecchiamento della pelle dipende anche dal livello di ossigeno che essa contiene.

L'ossigenoterapia si basa sull'applicazione di ossigeno puro nella pelle; col passare degli anni infatti i depositi di ossigeno nel derma diminuiscono, grazie a questa terapia, si recupera l'elasticità, si rallenta l'invecchiamento e si stimola la rigenerazione del collagene.

L'associazione della perfusione d'ossigeno con attivi come collagene, elastina, acido ialuronico, peptidi. Assicurano alla pelle un aspetto tonico e rigenerato.



■ Aerografo

Keep Oxigen permette di: rigenerare i tessuti, ridisegnare i contorni del viso, levigare ed idratare la pelle, favorire il miglioramento dell'acne in tutte le sue forme, migliorare le smagliature rendere molto luminose le zone trattate, drenare la ritenzione superficiale dei liquidi nei tessuti decongestionare la pelle con benefici importanti sull'inestetismo della couperose, donare un lieve effetto lifting sulle smagliature.




OSSIGENOTERAPIA

L'EVOLUZIONE DEI TRATTAMENTI TRICOLOGICI

Supportati dalla tecnologia più avanzata che agisce attraverso l'erogazione di ossigeno, per migliorare diverse problematiche presenti su cute e capelli di uomini e donne.

OXIGEN2 Ha un'azione importante sui **capelli** rendendoli **forti, lucenti, sani, giovani**; mentre il **cuoio capelluto** dopo il trattamento sarà **pulito, idratato, senza eccesso di sebo, senza forfora, sano, ossigenato**.

Questo è quanto si verifica sottoponendo la cute ed il capello ad un trattamento di ossigeno molecolare che oltre a potenziare il metabolismo cellulare regolarizzando tutti i processi metabolici sub-tissutali, permette di rinforzare qualsiasi struttura, con la quale viene a contatto sia la cute e sia il capello.

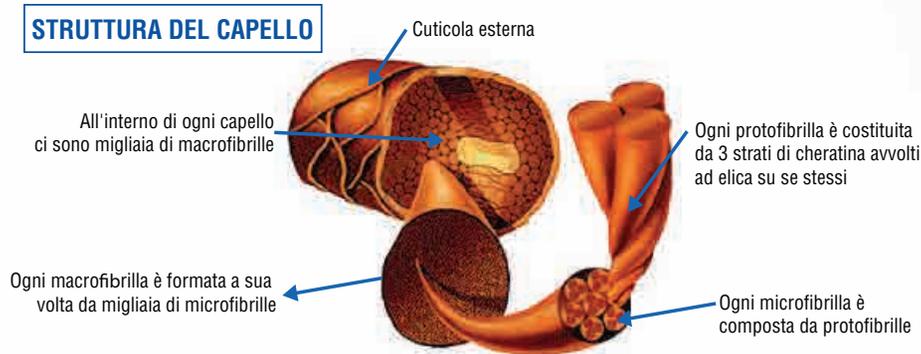

I costituenti principali del capello sottoposto ad analisi chimica sono acqua, cheratina, lipidi, minerali e pigmenti.

Tutti i costituenti del capello sono fondamentali ed estremamente sensibili alle variazioni ormonali, genetiche, climatiche, quindi influenzabili da fattori endogeni ed esogeni.

I pigmenti naturali costituiti dalle melanine e principalmente dalla feomelanina presente nei capelli dorati, rossi o biondi e dall'eumelanina, presente nei capelli neri, sono tra i primi, insieme alla cheratina, a risentire di stress diversi, evidenziando, opacità e perdita di struttura del capello.

Anche il cuoio capelluto assorbe quanto veicolato dalla Oxigen2, quindi: ossigeno e principi attivi a scelta, in base alla problematica che cute e capello presentano.

Sui capelli è consigliabile applicare i principi attivi più densi, mirati a ristrutturare, lucidare e riparare il capello, direttamente su tutta la lunghezza, ed erogare ossigeno ciocca per ciocca affinché si possa potenziare l'effetto e veicolare maggiormente i principi attivi, rinforzando il capello stesso.

Sul cuoio capelluto è consigliabile erogare direttamente il principio attivo (dopo una pulizia della cute) versato precedentemente nell'ampolla posta sull'aeropenna dell'Oxigen2.

Questo permetterà di ossigenare notevolmente il cuoio capelluto, favorire la veicolazione di principi attivi in modo diffuso e/o mirato sulla cute, liberarla da tossine ed agenti che favoriscono tutte le problematiche, quali pitiriasi, iperseborrea, disidratazione, iperidrosi, cute sensibile.

Sia sui capelli che sulla cute/cuoio capelluto, il risultato sarà visibile dai primi trattamenti e si protrarrà nel tempo grazie alla permanenza dei principi attivi erogati.

DURATA DELLA SEDUTA

La seduta dura dai 40 ai 60 minuti a seconda del protocollo scelto e della problematica esistente.

CAPELLI

Sono consigliati 8 - 10 trattamenti una volta a settimana ed il ciclo di mantenimento una volta al mese.

CUOIO CAPELLUTO

Sono consigliati 15 -18 trattamenti. Le prime 4 settimane due sedute a settimana; i successivi 2 mesi, una seduta a settimana.



Con **DEPILA**
Perdi il PELO
ma non il **VIZIO**



DEPILA
Laser Diodo

*Per tutti
i tipi di pelle*

LASER DIODO *DI ULTIMA GENERAZIONE*

Epilazione sicura - efficace - indolore


L'epilazione laser diodo è una tecnica di ultima generazione che ti libera dai peli superflui, con un metodo sicuro e indolore.

Depila Laser Diodo tratta i peli con fasci di luce ad una lunghezza d'onda prestabilita di 808 nm, per un processo denominato fototermolisi selettiva, l'energia luminosa si trasforma in energia termica che va a colpire l'interno del bulbo pilifero che viene riscaldato senza danneggiare i tessuti.

Seguendo un protocollo di trattamento con questa tecnica di epilazione progressiva permanente si ottiene una notevole riduzione dei peli.

PERCHÈ SCEGLIERE DEPILA?

- Trattamento **rapido** e **indolore**
- Adatto a tutti i fototipi di pelle anche quelle abbronzate
- Il trattamento può essere effettuato tutto l'anno

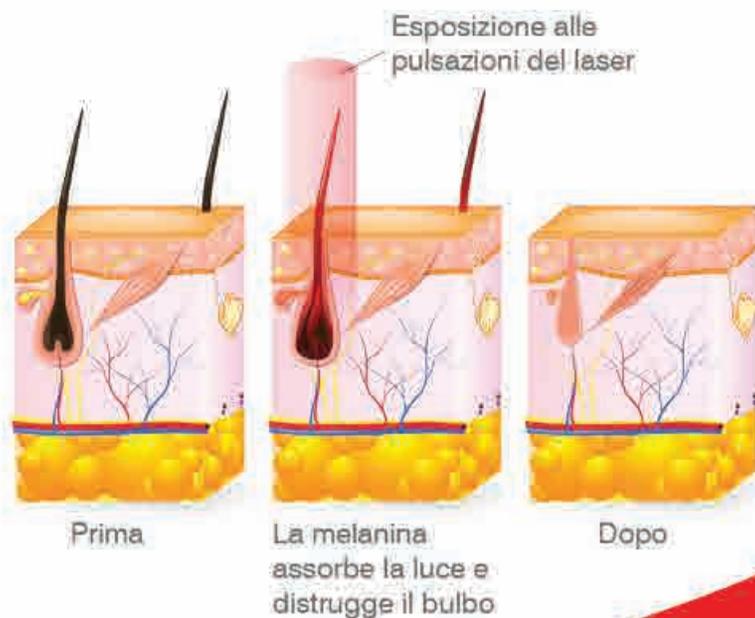

Il trattamento che rende il tuo corpo piacevole da accarezzare


Trattamento indolore **NON** invasivo per **cellulite** e **adipe localizzato**



**SOUND
BODY**
onda acustica

Indicato per **tutto il corpo**
È consigliato per trattare
le smagliature post gravidanza

Con **SOUND BODY** si può notare dalle prime sedute un miglioramento del tono tissutale e degli inestetismi. L'onda acustica stimola i tessuti in profondità e attiva un processo di innalzamento della temperatura che induce un miglioramento del metabolismo e del microcircolo e l'aumento della produzione di **elastina** e **collagene**.

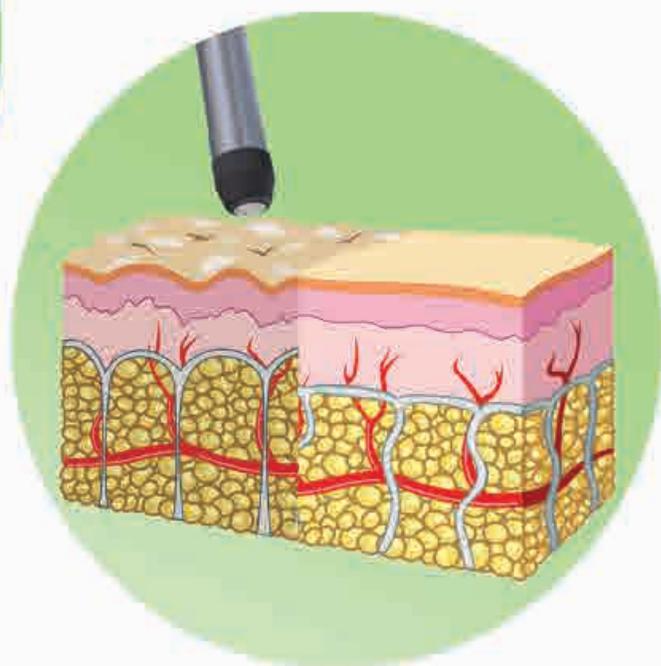

L'apparecchio **Sound Body** per trattamenti ad onda acustica è l'ultimo ritrovato tecnologico per sconfiggere gli inestetismi della cellulite e adipe localizzato in brevissimo tempo e con ottimi risultati.

Sono particolari onde acustiche ad alta energia, che hanno come obiettivo principale il trasferimento di energia ai tessuti corporei, per stimolarne i processi rigenerativi. Quando le onde d'urto attraversano un fluido generano oscillazioni ad alta frequenza dando origine alla formazione di bolle di gas, una successiva onda d'urto che colpisce le bolle così formate va a determinare una violenta implosione e formazione di un getto di liquido (jet-stream) che interesserà il tessuto da trattare (per esempio coscia, fianco o addome), riducendo e compattando il volume. Questa stimolazione del metabolismo cellulare si traduce in un **miglioramento del tono tissutale, riduzione del pannicolo adiposo** e degli **inestetismi da ritenzione idrica**.

La caratteristica del Sound Body è nella selettività tissutale delle onde acustiche indotte.



Keep Young Qim

Apparecchiatura
2in1

RADIOFREQUENZA CAPACITIVA ABBINATA ALL' ELETTROPORAZIONE

E' un apparecchio per il trasferimento localizzato di "calore". Il tessuto sottocutaneo viene riscaldato con onde a "radiofrequenza" grazie ad un sistema capacitivo. L'accoppiamento viene ottimizzato tramite un sistema feedback automatico, che previene eventuali impulsi in caso di distacco degli elettrodi. Lo strumento è particolarmente indicato per il trattamento localizzato degli inestetismi della cellulite e della pelle, quali rughe, pelle a buccia di arancia o post-acne dimostrando in ottimo effetto anti-aging.

L'effetto biologico del calore prodotto dalla "radiofrequenza" a livello del derma è una denaturizzazione delle fibre collagene (dal 5% al 30% delle fibre totali) con conseguente contrazione immediata delle fibre stesse. Si ottiene una stimolazione dell'attività dei fibroblasti, con sintesi di nuovo collagene, elastina e acido ialuronico, e con un aumento della densità dermica, che migliora l'aspetto. Il risultato visivo è immediato, l'aumentata produzione di collagene riduce le rughe sul viso, distende la pelle ed elimina l'effetto a buccia d' arancia.

Durante il trattamento si ottiene un sensibile aumento della permeabilità della pelle che aumenta e favorisce in maniera consistente la penetrazione dei principi attivi. Con la penetrazione del prodotto nella parte basale della cute, si ottengono risultati mai raggiunti prima senza dolore, senza aghi, senza bisturi!

Negli strati profondi del derma e nella parte "corpuscolare" della pelle, il principio attivo può finalmente agire in modo diretto e immediato sui processi di rigenerazione cutanea, portando risultati importanti e duraturi. I trattamenti con elettroporazione sono immediatamente efficaci e visibili: la pelle è idratata e distesa, rughe e solchi sono meno profondi, il tono è migliorato.

IL RISCALDAMENTO DELLA ZONA TRATTATA DETERMINA

- miglioramento della circolazione locale del sangue;
- riassorbimento e drenaggio dei liquidi in eccesso;
- riduzione dei depositi di grasso;
- riduzione della cellulite;
- ringiovanimento cutaneo;
- miglioramento dell'elasticità tissutale



*escluso accessori

PRESS PLUS PRESSOMASSAGGIO E DRENAGGIO VENOLINFATICO

Apparecchio di ultima generazione nel campo del presso - massaggio e drenaggio venolinfatico degli arti superiori e inferiori. Dotato di programmi sia standard e individuali che consentono di effettuare trattamenti mirati a seconda delle differenti caratteristiche morfologiche e delle esigenze del singolo cliente.

Sistema di regolazione "Dynamic Press"

La Press Plus e' l'unico apparecchio per drenaggio linfatico che applica la pressione ai vari settori in modo intelligente, cioe' variandola in ogni fase in funzione di quello che il programma specifico richiede, mentre regolando l'apparecchio in modo manuale si puo' impostare la pressione per ogni settore.

Gambali ergonomici e rapidi da montare sulla cliente.

PRESS PLUS

Apparecchiatura per pressomassaggio e drenaggio venolinfatico

PRESS PLUS DIGIT A 8 SETTORI

Pressoterapia digitale con display a colori, gambali ergonomici

PRESS PLUS A 7 SETTORI

Apparecchiatura per pressomassaggio, 20 programmi



*escluso accessori



▣ Gambale



MODEL YOUNG



MODEL YOUNG Elettrostimolatore comandato da un microprocessore che genera correnti faradiche, cotz, sinusoidali, esponenziali, creato da un team di ingegneri esperti nel campo dell'elettronica per risolvere i problemi legati alla perdita di tono muscolare. Dotato di accessori che consentono di effettuare trattamenti personalizzati di tonificazione, ginnastica, sviluppo muscolare, rassodamento e drenaggio di tutto il corpo.

L'apparecchiatura è comandata da un microprocessore con 16 programmi per viso/corpo:

- Tonificazione
- Rassodante superficiale
- Rassodamento profondo
- Isomodellante
- Modellante
- Drenaggio superficiale
- Drenaggio profondo
- Elettrolipolisi
- Bioregen
- Miolifting
- Dinaionizzazione
- Drenaggio manuale
- Regen Face
- Lifting
- Toning
- Drenaggio

FACE YOUNG

Apparecchio lifting viso
Laser su richiesta

■ Manipolo laser IR 902 nm



■ Spatola US



Apparecchiatura completa che consente ai professionisti dell'estetica di effettuare trattamenti per viso, decollete' e seno attraverso ultrasuoni, elettroterapia e laser. Face Young consente di effettuare micromassaggio, pulizia profonda, ionizzazione dei prodotti attraverso la ionoforesi, stimolando il ricambio cellulare e favorendo la distensione e rigenerazione dell'epidermide attraverso un'azione biostimolante particolarmente efficace contro rughe e smagliature.

- Programmi ad ultrasuoni con spatola: clean - lead in - pulse
- Programmi elettroterapia e laser: antiage - electrophoresis - laser IR - stimolazione - hidra - lifting - Biostimolazione
- Laser IR: impulsato per rughe, smagliature e pelle atona

ELETTROEPILAZIONE
INDOLERE

DEPIL PLUSS

Epilatore elettronico ed
elettrocoagulatore centesimale

DEPIL PLUSS è un EPILATORE elettrico ed elettrocoagulatore centesimale **AGO**, **PINZA** e **SCAN**, è un moderno apparecchio che permette di effettuare la depilazione con tre sistemi operativi:

FLASH PULSES: sistema di depilazione ad ago ultra rapido erogato in modo singolo e con tempi da 1 a 250 millesecodi.

PULSES: sistema ad impulsi ripetitivi con programmazione del numero da 1 a 9. Molto utile per peli grossi e resistenti.

PINZA-SCAN: per trattamento di progressivo indebolimento dei follicoli piliferi sia con la pinza tradizionale che con la sonda scan e gel specifici anti-ricrescita.



Pinza ergonomica per epilazione



Porta aghi "Elettrobisturi"



Manipolo curvo

DEPIL YOUNG

Epilatore elettronico ed
elettrocoagulatore centesimale

Il DEPIL YOUNG è un moderno apparecchio che permette di effettuare la depilazione con sei sistemi operativi:

FLASH PULSES: Sistema di depilazione ad ago ultra rapido erogato in modo singolo o ripetitivo

ACT: Sistema di attivazione dei prodotti elettroattivi sinergici ritardanti la crescita.

BLEND: Sistema americano che abbina l'idrolisi e la termolisi.

PINZA-SCAN: per trattamento di progressivo indebolimento dei follicoli piliferi.

COAGULATION: Elettrocoagulatore ad impulsi millesimali (480ms) per piccoli interventi di dermatologia.





FAI UNA SCELTA
DI SUCCESSO

BENVENUTI NEL MONDO

Keep[®]
young

MG
Divisione Estetica
Chieti - ITALY

Chieti Italy
Tel +39 0871560111 - Fax +39 0871572938
info@keepyoung.it

SERVIZIO CLIENTI
800-268468

www.keepyoung.it